

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	351 RAHMEN KURZ	352 RAHMEN MITTEL	353 RAHMEN LANG
Sitzbreite	300 - 360	360 - 580	360 - 580
Breite fahrbereit	Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB + 180)		
Breite gefaltet	280		
Sitztiefe	330 - 380	350 - 460	480 - 530
Sitzhöhe vorne	425 - 495	440 - 560	440 - 560
Sitzhöhe hinten	400 - 465	385 - 520	385 - 520
Gesamthöhe	830	920	920
Rückenhöhe	340 - 400	380 - 500	380 - 500
Armlehnenhöhe (CODE 81)	165 - 240	200 - 290	200 - 290
Länge mit Fußstütze	880	1040	1120
Personengewicht	75	135	160
Min. Leergewicht	12	13	14
Zul. Gesamtgewicht	87	148	174
Transportgewicht	8	8,5	9
Antriebsrad (22")	560	560	560
Antriebsrad (24")		610	610

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeit in km/h, Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt Konstruktiver Änderungen.

RAHMENFARBEN



MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 0
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

by www.bwc.gmbh

MEYRA[®] ACTIVE



» AVANTI
RELAUNCH «
OPTIMIERT BIS INS DETAIL

» ERLEBEN SIE DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN «

AUSSERDEM
NEU

- 10 Rahmenfarben ohne Aufpreis für individuelle Farbgestaltung, Varioblock und Lenkgabel in einer anderen Rahmenfarbe auf Anfrage möglich
- Rückengurthöhe in 460, 480 und 500 mm erhältlich
- Sitzgurtdurchhang nachspannbar
- 50 mm Radüberdeckung
- Alu-Doppelkreuzstrebe für Sitzbreiten 360–460 mm, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen
- Stützrollen abschwenkbar oder einsteckbar, als Paar oder einzeln anwählbar




Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhen von 350–410 mm bzw. 400–460 mm für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder



Sitzbreiten in 420 mm und 440 mm

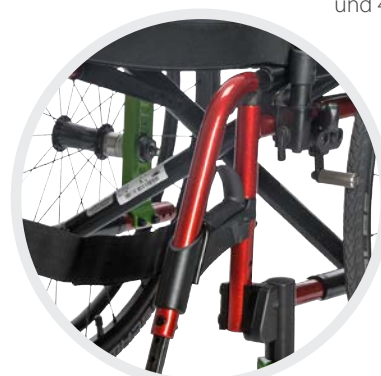

Beinstützbereich kompakt (Vorderrahmenwinkel 78°) oder standard (Vorderrahmenwinkel 70°), abnehmbar und wegschwenkbar



Stufen oder stufenlose Einstellung der Unterschenkelhöhe an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch verkürzte Unterschenkelhöhe von 290–390 mm möglich




Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Aktiv-Rad mit Radialspeichen, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge, Greifreifen farbige in blau, rot, gelb für mehr Individualisierung



Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt und leicht

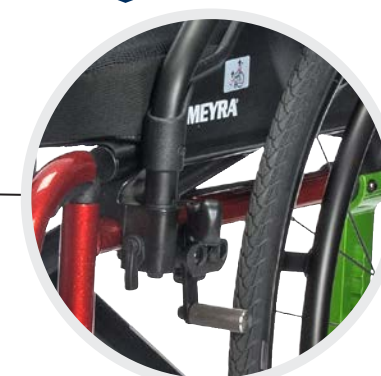

Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Curve GEKKO, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummilippe, ergonomisches Greifreifenprofil, ideal für Tetraplegiker